

Straight Shooter®枪式结扎圈放置器

Straight Shooter枪式结扎圈放置器是用于方丝弓托槽上弹性结扎圈的放置，使用方便、安全、卫生。它可避免止血钳或其他器具在结扎时滑脱或弄破牙体软组织。

有两种型号可选。迷你型枪式结扎圈放置器适用于迷你托槽和单翼托槽，标准型托槽和双翼托槽则使用双翼托槽枪式结扎圈放置器。


热塑材料坚固耐用，可进行高压高温灭菌消毒。

Straight Shooter枪式结扎圈放置器

- 100-357** 双翼托槽枪式结扎圈放置器
- 100-359** 迷你托槽枪式结扎圈放置器

补充装

- 100-363** 迷你托槽枪式结扎圈放置器活塞套装 - 1个活塞和4根指状钢丝
- 100-364** Straight Shooter枪式结扎圈放置器组装/拆卸工具
- 100-365** 双翼托槽枪式结扎圈放置器活塞套装 - 1个活塞和4根指状钢丝

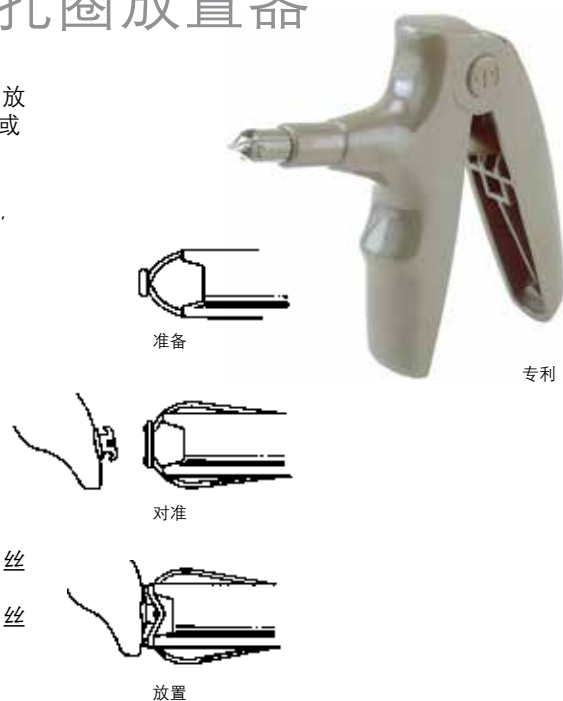

牙周锉

用于去除牙邻面的牙体组织，可在牙弓内获得间隙或打开接触点，恢复牙齿的形态或去除填充物悬突。金刚砂涂层的不锈钢砂片配合刀架使用更方便。

- 100-701** 牙周锉套装 (1把锯架，5片双面细砂和5片双面粗砂)

补充装

- 100-700** 牙周锉锯架补充装 (1把锯架)
- 100-703** 牙周锉砂片补充装 (10片双面细砂)
- 100-704** 牙周锉砂片补充装 (10片双面粗砂)
- 100-705** 牙周锉砂片补充装 (10片单面细砂)
- 100-706** 牙周锉砂片补充装 (10片单面粗砂)



测量分规

测量分规的最大测量值为14.4 cm (5.5"),由一个铰链和两个固定指针组成，表面镀镍，呈哑光色，不会生锈。

- 100-331** 测量分规



Click-It® 镊子

Click-It镊子专为Click-It自锁托槽而设计，含有手柄及开盖端和关盖端。

开盖端便于打开或关闭Click-It托槽盖。关盖端可用于关盖或辅助置入后牙区弓丝置入槽沟。

Click-It弯头镊子主要为后牙区域的托槽而设计，镊子与牙齿唇侧表面平行，提高使用效率。这种镊子也可用于前牙，无需备两个镊子。

弯头镊子有自对准的特征，确保在最佳位置打开托槽，从而避免镊子头部快速磨损。



100-198 Click-It镊子（直头）-单把

100-098 Click-It镊子（弯头）45° -单把

100-199 Click-It镊子（直头）开盖替换装
10个/包（5左5右）

100-200 Click-It镊子关盖替换
5个/包

100-099 Click-It镊子（弯头）45°
10个/包（5左5右）

涂层游离牵引钩

防滑的游离牵引钩是用在方形弓丝上，能承受的力与焊接牵引钩相同。牵引钩与弓丝接触的内表面有粗糙涂层，当牵引钩放到弓丝上，粗糙的内表面就紧扣住弓丝，防止牵引钩滑动。最好用在0.41 x 0.41mm (.016" x .016")到0.56 x 0.71mm (.022" x .028")的弓丝上。

226-010 涂层游离牵引钩
10个/包

226-020 定位涂层游离牵引钩
20个/包



专利