

Never-Mar工具

Never-Mar工具的表面有特殊抛光涂层，可长久保持崭新，不会留下指纹和划痕。该产品不附加收费。本目录中会指明是否使用Never-Mar涂层。

牵引钩钳（长柄）

由牵引钩钳改进而来的助力牵引钩钳，其特征是手柄更宽、更长。正畸医师使用这种钳子把TP的游离牵引钩放置在弓丝上时，可施加2倍多的同等力量。该钳子表面上涂有Never-Mar涂层。

100-192 牵引钩钳（长柄）



牵引钩钳

钳喙上有V形缺口，有利于游离牵引钩的夹持和定位固定。表面有Never-Mar涂层。


100-172 牵引钩钳



无槽沟细丝钳

钳喙光滑，可弯制0.30mm (.012")至0.56mm (.022")的弓丝。穿鳃式铰链部前方的扁平区用于整平弓丝并增强弓丝的夹持力。细丝钳表面有Never-Mar涂层。

100-130P 无槽沟细丝钳

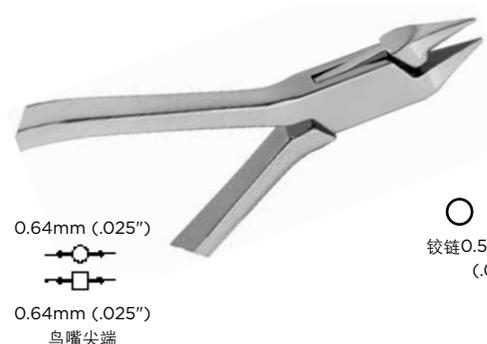

*售后服务内容解释权归TP公司所有。

含槽沟细丝钳

三槽沟细丝弯制钳的特点是在钳嘴底部有一个合环槽沟。可弯制最大尺寸为0.020"的圆丝、方丝和矩形丝。

100-125 含槽沟细丝钳



安全末端切断钳

剪断弓丝时弓丝远中端夹持在钳子上。钳喙可距颊管远中0.5mm (.0197")以内，钳子表面有Never-Mar涂层。

100-138P 安全末端切断钳



标准型结扎丝切断钳

喙部刀刃锋利，可切断最粗为0.41mm (.016")的钢丝、栓钉和弹性橡皮链。钳子表面有Never-Mar涂层。

100-140P 标准型结扎丝切断钳



后牙带环去除钳

不锈钢钳喙中等长度，末端有护套。钳子表面有Never-Mar涂层。

100-141P 后牙带环去除钳



温氏钳

不锈钢钳喙中等长度，末端有护套。钳子表面有Never-Mar涂层。

100-149P 温氏钳



*售后服务内容解释权归TP公司所有。

弓丝成形钳

用于前牙弓形的修整。用钳喙的不同部位夹持弓丝可以形成大小不同的弓形弧度。钳子表面有Never-Mar涂层。

100-128 弓丝成形钳



分牙圈钳

用于分牙橡皮圈的放置，钳子不可以过大张开，否则会导致橡皮圈拉断。钳喙末端圆钝，在使用时可保护患者，也可夹住橡皮圈。大号或小号的分牙橡皮圈都可使用这把钳子。

100-135 分牙圈钳



蚊式直头止血钳

总长为11.4 cm (4.5")，锯齿状头部细长，用于弹性橡皮圈的结扎。柄部带锁卡。

100-132 蚊式直头止血钳



结扎钳

不锈钢末端分插入式和非插入式，柄部带锁卡。

100-146 插入式结扎钳

100-185 非插入式结扎钳



*售后服务内容解释权归TP公司所有。