

Tru-Force® 乳胶牵引圈 纸盒装

纸盒装牵引圈内有60个或80个自锁封口的小包，100个/包。



直径	包装颜色代码	预设力值	实际力值		普通乳胶牵引圈 产品代码	彩色牵引圈 产品代码	单人套装 个/盒
			30mm	20mm			
1/8"	白色	2 oz.	3.7 oz. (105 g)	3.2 oz (92 g)	362-505	372-505	80
	红色	3.5 oz.	4.0 oz. (113 g)	3.6 oz (104 g)	362-504	372-504	80
3/16"	灰色	4.5 oz.	4.5 oz. (129 g)	4.2 oz (120 g)	362-514	372-514	80
	深粉色	6 oz.	8.7 oz. (249 g)	7.2 oz (206 g)	362-524		60
	洋红色	8 oz.	10.6 oz. (301 g)	9.0 oz (256 g)	362-534		60
1/4"	蓝色	3.5 oz.	4.6 oz. (131 g)	3.3 oz (94 g)	362-503	372-503	80
	橙色	4.5 oz.	4.9 oz. (139 g)	3.5 oz (99 g)	362-513	372-513	80
	草绿色	6 oz.	8.0 oz. (228 g)	5.6 oz (161 g)	362-523		60
	淡黄绿	8 oz.	10.0 oz. (284 g)	6.8 oz (195 g)	362-533		60
5/16"	黄色	2 oz.	2.6 oz. (74 g)	1.6 oz (47 g)	362-500	372-500	80
	绿色	3.5 oz.	3.1 oz. (89 g)	1.8 oz (54 g)	362-502	372-502	80
	黄褐色	4.5 oz.	3.6 oz. (103 g)	2.2 oz (63 g)	362-512	372-512	80
	紫红色	6 oz.	6.5 oz. (187 g)	4.0 oz (114 g)	362-522		60
3/8"	粉色	3.5 oz.	2.9 oz. (83 g)	1.5 oz (43 g)	362-501	372-501	60
	淡紫色	4.5 oz.	3.2 oz. (93 g)	1.7 oz (50 g)	362-511	372-511	60

普通乳胶牵引圈呈浅琥珀色或几乎透明。


Col-R-Lastics® 牵引圈每种颜色单独包装。
牵引圈上的颜色层很薄，但在治疗期间不会褪色。



普通包装
琥珀色



彩色包装
一盒一种颜色

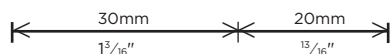

Tru-Force® 的力值随时间和被拉长的距离而变化。力值的测定是拉伸牵引圈至其弹性极限而得，这种测定时在模拟口腔环境中进行。一般，通过拉长牵引圈至其直径的5倍来测量其弹力。在口中很难达到3倍的距离，而且这种方法也很不实用。牵引圈拉伸至其3倍直径时，测量值之间的差异很小，上表所列的数值仅供参考。不排除一部分人对乳胶牵引圈可能会产生过敏反应。

Tru-Force® 乳胶牵引圈 小袋包装




小袋包装牵引圈内有20个带有自锁封口的小包，100个/包。
医师无需再进行手工分装，这样既节省时间又便于使用。

直径	包装颜色代码	预设值	实际值		普通乳胶牵引圈 产品代码	彩色牵引圈 产品代码
			30mm	20mm		
1/8"	白色	2 oz.	3.7 oz. (105 g)	3.2 oz (92 g)	362-005	372-005
	栗色	3.5 oz.	16.0 oz. (454 g)	5.0 oz (142 g)	362-015	
	红色	3.5 oz.	4.0 oz. (113 g)	3.6 oz (104 g)	362-004	372-004
3/16"	灰色	4.5 oz.	4.5 oz. (129 g)	4.2 oz (120 g)	362-014	372-014
	深粉色	6 oz.	8.7 oz. (249 g)	7.2 oz (206 g)	362-024	
	洋红色	8 oz.	10.6 oz. (301 g)	9.0 oz (256 g)	362-034	
1/4"	蓝色	3.5 oz.	4.6 oz. (131 g)	3.3 oz (94 g)	362-003	372-003
	橙色	4.5 oz.	4.9 oz. (139 g)	3.5 oz (99 g)	362-013	372-013
	草绿色	6 oz.	8.0 oz. (228 g)	5.6 oz (161 g)	362-023	
5/16"	淡黄绿	8 oz.	10.0 oz. (284 g)	6.8 oz (195 g)	362-033	
	黄色	2 oz.	2.6 oz. (74 g)	1.6 oz (47 g)	362-000	372-000
	绿色	3.5 oz.	3.1 oz. (89 g)	1.8 oz (54 g)	362-002	372-002
3/8"	黄褐色	4.5 oz.	3.6 oz. (103 g)	2.2 oz (63 g)	362-012	372-012
	紫红色	6 oz.	6.5 oz. (187 g)	4.0 oz (114 g)	362-022	
	粉色	3.5 oz.	2.9 oz. (83 g)	1.5 oz (43 g)	362-001	372-001
3/8"	淡紫色	4.5 oz.	3.2 oz. (93 g)	1.7 oz (50 g)	362-011	372-011


小袋包装共2,000个牵引圈
(20袋单人套装，100个/袋，根据重量分装。)

普通乳胶牵引圈呈浅琥珀色或几乎透明。

Col-R-Lastics® 牵引圈每种颜色单独包装。
牵引圈上的颜色层很薄，但在治疗期间不会褪色。

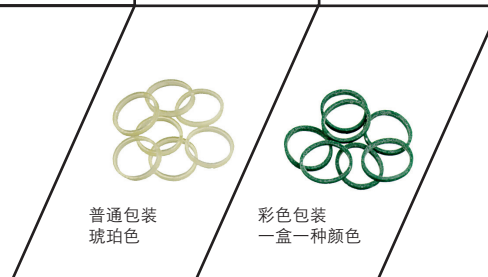

TP选用优质医用乳胶管制作牵引圈。统一的牵引圈厚度和精密的切割技术确保可靠的牵引力量。

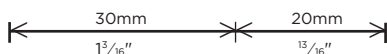






Tru-Force® 的力值随时间和被拉长的距离而变化。力值的测定是拉伸牵引圈至其弹性极限而得，这种测定时在模拟口腔环境中进行。一般，通过拉长牵引圈至其直径的3倍来测量其弹力，在口中很难达到3倍的距离，而且这种方法也很不实用。牵引圈拉伸至其3倍直径时，测量值之间的差异很小，上表所列的数值仅供参考。不排除一部分人对乳胶牵引圈可能会产生过敏反应。

Tru-Force® 乳胶牵引圈

大袋包装



大袋包装牵引圈每包含1,000个牵引圈，有自锁封口。医师可根据患者的需要重新进行组装。

直径	包装颜色代码	预设力值	实际力值		普通乳胶牵引圈 产品代码	彩色牵引圈 ¹ 产品代码
			30mm	20mm		
 1/8"	白色	2 oz.	3.7 oz. (105 g)	3.2 oz (92 g)	360-005	370-005
	红色	3.5 oz.	4.0 oz. (113 g)	3.6 oz (104 g)	360-004	370-004
 3/16"	灰色	4.5 oz.	4.5 oz. (129 g)	4.2 oz (120 g)	360-014	370-014
	深粉色	6 oz.	8.7 oz. (249 g)	7.2 oz (206 g)	360-024	
	洋红色	8 oz.	10.6 oz. (301 g)	9.0 oz (256 g)	360-034	
 1/4"	蓝色	3.5 oz.	4.6 oz. (131 g)	3.3 oz (94 g)	360-003	370-003
	橙色	4.5 oz.	4.9 oz. (139 g)	3.5 oz (99 g)	360-013	370-013
	草绿色	6 oz.	8.0 oz. (228 g)	5.6 oz (161 g)	360-023	
	淡黄绿	8 oz.	10.0 oz. (284 g)	6.8 oz (195 g)	360-033	
 5/16"	黄色	2 oz.	2.6 oz. (74 g)	1.6 oz (47 g)	360-000	370-000
	绿色	3.5 oz.	3.1 oz. (89 g)	1.8 oz (54 g)	360-002	370-002
	黄褐色	4.5 oz.	3.6 oz. (103 g)	2.2 oz (63 g)	360-012	370-012
	紫红色	6 oz.	6.5 oz. (187 g)	4.0 oz (114 g)	360-022	
 3/8"	粉色	3.5 oz.	2.9 oz. (83 g)	1.5 oz (43 g)	360-001	370-001
	淡紫色	4.5 oz.	3.2 oz. (93 g)	1.7 oz (50 g)	360-011	370-011

根据重量包装，1,000个/包

普通乳胶牵引圈呈浅琥珀色或几乎透明。


Col-R-Lastics 牵引圈每种颜色单独包装。
牵引圈上的颜色层很薄，但在治疗期间不会褪色。



普通包装
琥珀色



彩色包装
一盒一种颜色

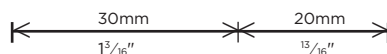

Tru-Force 的力值随时间和被拉长的距离而变化。力值的测定是拉伸牵引圈至其弹性极限而得，这种测定时在模拟口腔环境中进行。一般，通过拉长牵引圈至其直径的3倍来测量其弹力，在口中很难达到3倍的距离，而且这种方法也很不实用。牵引圈拉伸至其3倍直径时，测量值之间的差异很小，上表所列的数值仅供参考。不排除一部分人对乳胶牵引圈可能会产生过敏反应。