



陶瓷托槽
设计新标准





模特佩戴的ClearVu隐形陶瓷托槽，应用了个性化牙色配比技术。图片未经任何修饰。

创新设计

+ 便利医生和患者

隆重向您介绍**ClearVu**隐形陶瓷托槽，最新的设计将美观治疗提升到新高度。

美国TP正畸公司，个性化牙色配比技术的创始者，给您带来全新的ClearVu隐形陶瓷托槽。为所有正畸患者提供理想的美观解决方案，尤其是那些想要达到隐适美的隐形效果，但却不符合隐适美适应症的患者。医生信赖双翼托槽设计以及简便的拆除过程。病人认可光滑、不易变色的托槽表面和卓越的隐形效果。

ClearVu® 隐形陶瓷托槽由最新的高密度陶瓷材料构成，更能符合您的高标准，达到患者的高期望值，无需延长治疗时间。

使用预置粘结剂节省治疗时间（中国市场暂不供应）

ClearVu隐形陶瓷托槽也有预置粘结剂系列可选。托槽底板预置的粘结剂使粘结过程更方便高效。

- 打开包装即可粘结
- 降低污染的风险
- 托槽放置不会滑脱
- 节约大量的清洁时间



精准的设计

+ 性能提升

秘密在于底板

专利的聚合网底设计使ClearVu隐形陶瓷托槽在同类产品中脱颖而出，并在托槽与牙釉质之间形成保护层。这种网状底板设计与金属托槽底板非常接近。拆除托槽时底板发生轻微弯曲，拆除干净而轻松。过程中不用夹碎托槽，也不需要专用工具。

快速、干净地拆除托槽

对您的病人来说，托槽拆除既安全又舒适。由于可弯曲的底板，ClearVu隐形陶瓷托槽不需要专用工具就能轻易拆除，一把普通的结扎丝切断钳即可。无需夹碎托槽，使用日常工具将还在结扎状态的托槽轻松拆除。

卓越的美观效果

因为底板和托槽都是半透明的，显示的只有您的自然牙色。

理想的粘结强度

可弯曲的聚合底板粘结力牢固，既有化学粘结又有机械粘结，从根本上消除粘结失败的可能性。在托槽拆除的安全性、便利性和干净程度方面，没有其他托槽能与ClearVu隐形陶瓷托槽相媲美

安全接触

作为一项安全措施，聚合网底层避免牙釉质与陶瓷直接接触。所以您尽可放心，拆除时不会对牙齿造成任何损伤。



出色的隐形效果



个性化牙色配比技术使ClearVu隐形陶瓷托槽几乎与任何牙色相匹配—照片中几乎看不到托槽。

高密度，多晶陶瓷

高密度材料使托槽表面超级光滑，降低托槽断裂的风险并提高病人的舒适度。

真正的双翼托槽

成熟的设计使您拥有更多的结扎选择以达到预期目标。

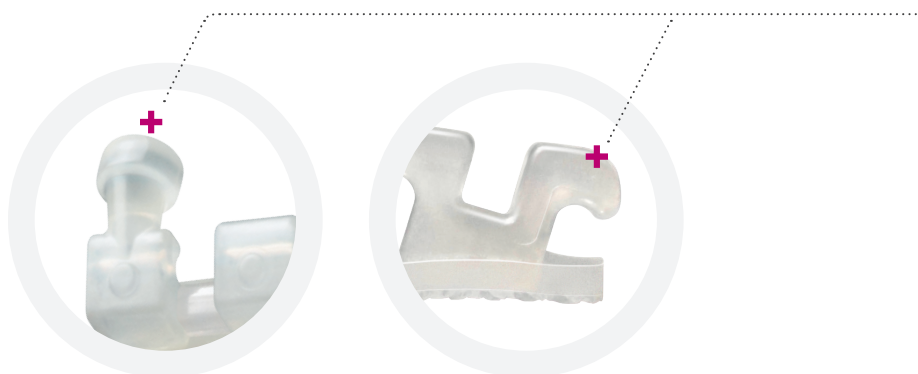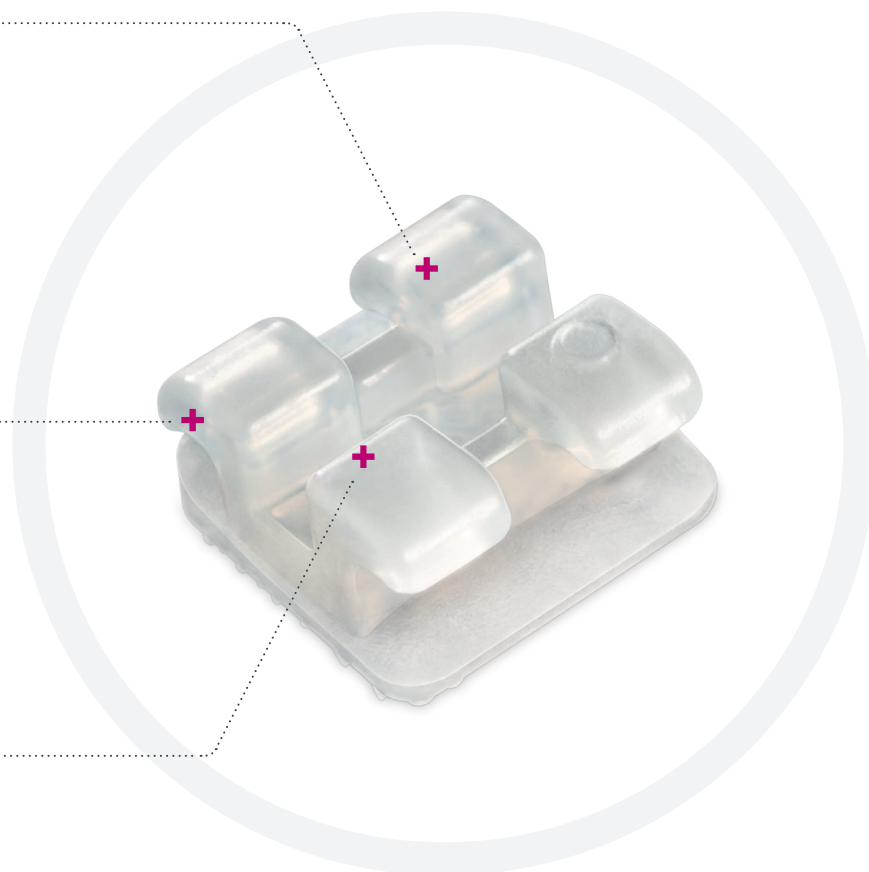


理想的结扎翼外形和牵引钩设计

更深的结扎倒凹与充足的结扎间隙确保最可靠的结扎效果。双尖牙和尖牙牵引钩末端球形设计，使弹性牵引更加稳固。病人自行悬挂牵引橡胶圈更方便。

完美的 牙色配比技术

+ 隐形效果更好

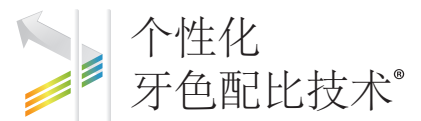

TP公司研发的个性化牙色配比技术做到真正的隐形，可适应任何牙色。

当与18款其他不同品牌的陶瓷托槽对比时，TP公司凭借个性化牙色配比技术成为能够与任何牙色相匹配的唯一品牌，也是唯一一个被评为“最不易察觉”的托槽品牌。¹

¹ 《光学特性（颜色、透明度和荧光）对美观托槽视觉感知的影响》

作者：Hibernon Lopes Filho, Lúcio E. G. Maia, Marcus Vinicius A. Araújo, and Antônio Carlos O. Ruellas; Rio de Janeiro, Brazil (Am J Orthod Dentofacial Orthop 2012;141:460-7).
版权所有：American Association of Orthodontists 2012.

想知道如何做到的吗？

视觉特征，包括颜色和透明度，在不同的患者之间存在较大差异。特殊设计的高密度陶瓷材质含有极微小的颗粒成分，能够将上述的视觉特性完美的呈现。当光和颜色被托槽所散射后，托槽与托槽周围的牙釉质颜色相融合，使托槽更隐蔽。

正是由于个性化牙色配比技术，ClearVu隐形陶瓷托槽可完美适配任何牙色。



图片中托槽的颜色未经任何修饰。

美观正畸治疗的新标准

拥有70多年丰富的行业经验，为全球的正畸医师提供有价值的解决方案，TP正畸已成为公认的正畸领军品牌。TP正畸再次提高了正畸治疗的标杆。

ClearVu隐形陶瓷托槽提供了可控的结扎方案，提升了粘接强度及安全舒适的拆除体验。医生信赖的托槽设计，患者认可的隐形效果使ClearVu成为美观托槽的新标杆。

致电**0510-85163367-9000**提高您的治疗标准或登录**tportho.asia**获得更多资讯。



美国总部: 100 Center Plaza
La Porte, IN 46350-9672 USA
800-348-8856

中国子公司: 托博正畸器械(无锡)有限公司
江苏省无锡市蠡园经济开发区A2二楼
邮编214072
电话0510-85163367-9000
传真0510-85165272

996-515CHN

ClearVu是美国TP公司的注册商标。在以下专利号许可下生产: 美国专利号6,746,242, 6,786,720, 7,131,836, 7,780,442; 中国专利号ZL03824889.1, 欧洲专利号1352617, 1562511, 德国专利号60315212.0, 60332263.8-08, 日本专利号4503440; 墨西哥专利号274623。个性化牙色配比技术是TP Orthodontics, Inc.的注册商标。所有版权归©2012 TP Orthodontics, Inc.所有。

